



SleepOne CPAP ailesi CPAP ve otomatik basınç ayarlı Auto CPAP cihazlarından oluşur. Her iki cihazda makul fiyat etiketleriyle çok amaçlı, sessiz ve iyi performans sağlayıcıdır.

Yüksek fiyatlı aksesuarları unutun! Etkili bir tedavi için yüksek fiyatlar ödemene gerek yok. Uyku geçmişinizle ilgili bilgilerinizi almak için ödeme yapmanıza gerek yok. Tamamı bu küçük ve dayanıklı makinenin içindedir. Rahat bir gece uykusu için ihtiyacınız olan her şey. Data kilitleme fonksiyonu sürekli doğru tedaviyi almanızı sağlar. SleepOne Software içeren paketi sayesinde, raporlarınızı sadece USB kablosu ile alabilirsiniz.


AutoPAP ve ya standart cihazdan hangisini kullanıyor olursanız olun, gece raporları SleepOne Software yardımıyla cihazdan alınabilir.

Dahili güç kaynağı, seyahat sırasında kolay taşıma olanağı sağlar ve yatak odasında karışıklığı önler. Sadece ince bir elektrik kablosu cihazı çalıştırmak için yeterlidir. İhtiyaç halinde opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Oksijen zenginleştirme adaptörü, otomobil, kamyon ve teknelerde kullanmak için 12V jak dönüştürücü.

Auto-On ve Auto-Off fonksiyonları, eğer tedarikçi, hasta ile ilgili bir sorun yaşarsa, durdurulabilir ve kilitlenebilir. SleepOne cihazları hastaya konfor, güven ve maddi kolaylık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç Aralığı(cmH2O)	3-20cm H2O (0.5 artış)
Akış	0 cm H2O 180 lt/dk 20cm H2O >50 lt/dk
İrtifa Ayarı	Otomatik
Ölçüler	18.1 x 15.5 x 11.7 cm
Ağırlık	1.27 kg
Güç Tüketimi	65 W
Voltaj	100-230 V AC
Garanti	2 Yıl
Gürültü Seviyesi	<29 dB
Raporlama Yazılımı	SleepOne Software
Auto-On / Auto-Off	Var
Mask Off	Var
Ayarlanabilir Parametreler	Rampa Süresi, Rampa Başlangıç Basıncı, Auto-On, Auto-Off, CPAP Maske Kaçak Alarmı, Tedavi basıncı

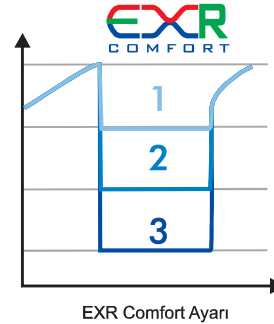

Yeni Kolay Nefes Özelliği EXR Comfort

EXR Comfort, hastanın solunum döngüsünde, nefes verirken basıncı düşürerek solunum eforunu azaltır. Bu azalma hastaya yarattığı rahatlama hissi ile konforu artırır, hastanın cihazla ve tedaviyle olan uyumunu yükseltir. 3 kademede ayarlanır. İstenirse kapatılabilir. Her kademe yaklaşık 1 cm H₂O'ya denk gelir.

SleepOne Cpap cihazında standard olarak sunulmaktadır.

